



Diseñado para Perdurar





# Diseñado

La gama de reactivos y aparatos de diagnóstico por su sencillez, flexibilidad y precisión. Nuestro éxito depende del compromiso de adaptarnos a estas necesidades siempre en el sentido de un



## **VIDAS : sistema de funcionamiento único y compacto unidos ahora a un diseño más actual**

### **Diseño Perfeccionado para mayor comodidad del usuario**

Partiendo de sus necesidades, presentamos un nuevo

Diseño del sistema para :

- **Mejorar el flujo de trabajo**, optimizando la carga de pruebas
- **Incrementar la comodidad de uso** en la introducción de datos y en la emisión de los resultados de los pacientes

### **Ahorro de tiempo con VIDAS**

- Reactivos de dosis única, listos al empleo (1 paciente = 1 prueba)
- Todos los reactivos incluidos en los kits
- Sistema robusto (MTBF\* > 452 días)
- Calibración cada 14 días
- Identificación automática por códigos de barras
- Solo cargar y procesar

**Flexibilidad**, donde y cuando usted lo necesite :

- 5 secciones independientes con 6 posiciones cada una
- Procesamiento simultáneo de diferentes parámetros
- Amplio Menú de rutina (más de 80 parámetros de Inmunología y Enfermedades Infecciosas)
- Presentación adaptada a diferentes volúmenes de pruebas (30 o 60 pruebas)

### **Calidad**

- Sin contaminación cruzada
- Pruebas de referencia : HIV Ultra, D-Dimer Exclusión™, Toxo Avidity...
- Realizado en numerosos controles de calidad externos por sus excelentes CVs

VIDAS dimensiones :

Alto : 58 cm (23 pulgadas)

Ancho : 105 cm (41,5 pulgadas)

Fondo : 68 cm (21,75 pulgadas)

VIDAS peso :

65 Kg (145 libras)

Necesidades Eléctricas:

Voltaje : 100-240 VAC

Consumo eléctrico : 3-1,2 A

Frecuencia : 50/60 Hz

Potencia : 280 VA máximo

Emisión de calor : aproximadamente

921 BTU/h



**CARTUCHO**

\* Tiempo medio entre fallos de funcionamiento

# o para Perdurar

Los VIDAS™ es reconocida en todo el mundo por su calidad,  
precisión,  
conocimiento de las necesidades del usuario.  
Para satisfacer estas necesidades, optimizamos el diseño del sistema VIDAS  
para ofrecer una mayor facilidad de utilización.

**Calidad reconocida,**



## La Simplicidad marca la diferencia


El sistema VIDAS, usa reactivos de dosis única, listos al empleo

- 1• El **Cono (SPR\*)** actúa como fase sólida de la reacción, y está recubierto con antígenos o anticuerpos
- 2• El **Cartucho (Strip)** contiene todos los reactivos necesarios para la reacción

El Cono actúa como dispositivo de pipeteo

En cada etapa de la reacción, los reactivos se aspiran dentro y fuera de él. Este original concepto previene cualquier tipo de contaminación inter-muestras o inter-reactivos. En suma, la ausencia de tubos, jeringas y agujas reduce el mantenimiento del sistema al mínimo.

El sistema VIDAS utiliza el principio ELFA, Combinando el método ELISA con una lectura final en fluorescencia azul.  
Esta tecnología asegura excelentes resultados de sensibilidad y especificidad.

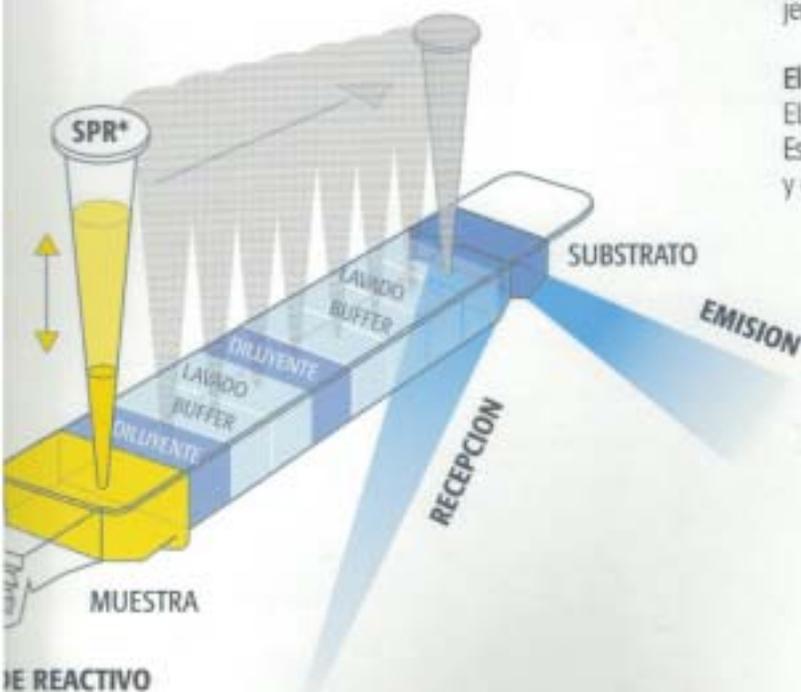

\* SPR : Solid Phase Receptacle

# VIDAS + VIDIA

## Una Solución Global

### Capacidad Multi-Network

- Interconexión de más de 5 sistemas VIDIA™ y/o VIDAS™ vía "single link" al LIS (Sistema Informático de laboratorio)

### Amplio Menú

- Más de 80 parámetros distintos
- Mas de 10 paneles en enfermedades infecciosas e inmunoquímica

### 2 Sistemas para Potenciar la Flexibilidad

- Gestión tanto de grandes como de pequeños volúmenes de tests
- Disponibilidad 100% a través de los dos sistemas
- Gestión inmediata y sencilla de los tests
- Concordancia entre los resultados de rutina y los de back-up



Contacte con su representante local de bioMérieux  
Para mayor información y disponibilidad

bioMérieux España s.a.  
Manual Tovar, 45-47  
28034 Madrid  
Tel. : (34) 91.358 11 42  
Fax : (34) 91.358 06 29  
[www.biomerieux.es](http://www.biomerieux.es)

bioMérieux Mexico S.A. de C.V.  
Chihuahua N° 88, Col. Progreso  
C.P. 01080, D.F. Mexico  
Tel. : (52) 55 54819550  
Fax : (52) 55 56162245

[www.biomerieux.com](http://www.biomerieux.com)

